

- GB Pedal trainer**
- D Pedaltrainer**
- DK Pedaltræner**
- I Pedaliera**

*Item no.*  
*Art. Nr.*  
*Varenr.*  
*Codice*

**272002 & 272003**

## User manual



**CE**

**MOBILEX A/S**  
Grønlandsvej 5  
DK-8660 Skanderborg  
www.mobilex.dk

**GB Pedal trainer - item no. 272002**

**Product description**

Foldable pedal trainer with a 2-colored steel frame. The pedals have safety straps and the pedal resistance can be adjusted.

**Safety requirements**

- Make sure that this user manual is read by all persons using the device. Manufacturer don't take any responsibility for damages and/or injuries, caused by the fact that the user manual has not been followed.
- Only use the product in flawless condition.
- If defects or errors are detected you must immediately contact the dealer.
- Follow the information on the product label.
- Only use the product for the described purpose and only on even and flat surfaces.
- Do not stand on the pedal trainer.
- Use only sitting in a chair with the pedal trainer placed safely on the floor or by training of the arms, only placed safely on a surface of the right height.

**Assembly**

- Remove the device from the box and insert the adjustment knob.
- Turn the legs outwards until they both click in place.

**Adjusting the pedalling resistance**

The adjustment knob is for adjusting the resistance in the pedals. Turn the knob clockwise. Tighten or loosen as desired.

**WARNING!**

Device may get hot by extended use!

**Cleaning & Maintenance**

Normal dirt on metal and plastic parts can be removed with standard cleaning agents. Check the specific product information and use only commercial cleaning products which are suitable for cleaning and disinfection (no solvents or abrasives).

**Recommended service life:** Normally 10 years depending on use.

**Reuse**

The product is suitable for recycling.

**Disposal of the product**

The product may not be disposed of with household waste but must be brought to the local recycling site.

**GB Pedal trainer - item no. 272003**


**Model with LCD Display**

The 272003 model differs from the 272002 model on the additional multifunctional LCD display.



**The display provides the following functions:**

- 1. Mode** (red button). This control allows you to select a particular function. To start, press and hold the Red Button for 4 seconds. The LCD will display the different functions (after a few minutes without movement, the unit will automatically shut off).
- 2.** To select a function, wait until the 4 second setup is complete. Push the red button and the arrow will move through the functions. When the desired function is selected, simply use the pedal trainer and the unit will calculate

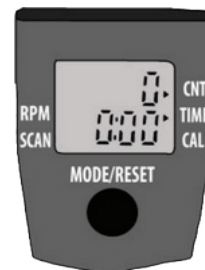

the exercise.

- 3. Time:** Determines the amount of the time the pedal trainer has been operating.
- 4. Counter (CNT):** Determines the amount of steps while operating the pedal trainer.
- 5. Calorie (CAL):** Determines the amount of calories burned while using the pedal trainer.
- 6. Reps per minute (RPM):** Automatically calculates the repetitions per minute.
- 7. Scan:** Will automatically show the results of all functions.

**Battery replacement**

If the display does not turn on or reads incorrectly, the battery requires replacement.

To replace the battery, use a small screw driver and remove the display panel. Turn the display panel over and remove the watch-style battery. Insert a new battery and insert the display panel again.

## D Pedaltrainer - Art. Nr. 272002

### Produkt Beschreibung

Der Mobilex Pedaltrainer hat einen 2 farbigen Stahlrahmen. Die Pedale haben Sicherheits-schlaufen. Der Tretwiderstand ist einfach einstellbar.

### Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nur im einwandfreien technischen Zustand.
- Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden, kontaktieren Sie bitte unverzüglich Ihren Händler.
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber.
- Bitte nutzen Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Einsatzbereich.
- Den Pedaltrainer nur auf geraden und ebenen Flächen verwenden.
- Belasten die das Gerät nicht mehr als mit dem zulässigen Gewicht und steigen Sie nicht auf das Gerät.

### Montagehinweise

- Entfernen Sie das Gerät aus der Verpackung und montieren Sie den Einstellknopf.
- Klappen Sie die Standbeine nach außen bis diese in die Arretierung "einschnappen".

### Tretwiderstand einstellen

Um den Tretwiderstand einzustellen verwenden Sie den Einstellknopf an der Oberseite des Pedaltrainers und drehen diesen im Uhrzeigersinn. Spannen oder lösen Sie den Einstellknopf bis Sie eine angenehme Widerstandseinstellung erreicht haben.

**ACHTUNG!** Der Pedaltrainer kann bei intensivem Gebrauch heiß werden!

### Wartung und Pflege

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel).

**Empfohlene Nutzungsdauer:** Normalerweise 10 Jahre je nach Verwendung.

### Wiederverwendung

Das Produkt ist zur Wiederverwendung geeignet.

### Entsorgung des Produktes

Das Produkt kann nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

## D Pedaltrainer - Art. Nr. 272003

### Modell mit LCD Display

Das Modell 272003 unterscheidet sich vom Modell 272002 durch das zusätzliche multifunktionale LCD Display.



### Das Display bietet folgende Funktionen:

**1. Mode** (roter Knopf). Durch betätigen des roten Knopfes können Sie unterschiedliche Funktionen abrufen. Um zu starten halten Sie den Knopf für 4 Sekunden gedrückt. Das Display zeigt nun die verschiedenen Funktionen (ohne weitere Tätigkeit schaltet sich das Display nach ein paar Minuten ab).

**2.** Um eine Funktion auszuwählen warten Sie bis der 4 Sekunden Start abgeschlossen ist, dann drücken erneut kurz Sie auf den Knopf, der Pfeil am Display bewegt sich nun durch die Funktionen. Wenn Sie die gewünschte Funktion erreicht haben, starten Sie mit dem Treten, die Einheit beginnt nun mit der Berechnung.

**3. Time:** Zeigt die Dauer an, während der der Pedaltrainer benutzt wurde.

**4. Counter (CNT):** Zeigt die Menge der Pedaltritte.

**5. Calorie (CAL):** Bestimmt die Anzahl der Kalorien an die während des Tretens verbrannt werden.

**6. Reps per Minute (RPM):** Zählt die Wiederholungen pro Minute.

**7. Scan:** Zeigt das Ergebnis aller Funktionen an.

### Austauschen der Batterie

Wenn keine Anzeige am Display erscheint oder die Anzeige schlecht lesbar ist muss die Batterie ausgetauscht werden.

Um die Batterie auszutauschen entfernen Sie mit einem kleinen Schraubenzieher die Abdeckung vom Display. Drehen Sie die Abdeckung um und tauschen Sie die Batterie (Uhren-Batterie) aus. Befestigen Sie anschließend die Abdeckung wieder.



**DK Pedaltræner - varenr. 272002**

**Produktbeskrivelse**

Pedaltræner med 2-farvet stålramme. Pedalerne har sikkerhedsbøjler og trædemodstanden kan indstilles.

**Sikkerhedsanvisninger**

- Benyt kun produktet i fejlfri stand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet, skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren.
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.
- Pedaltræneren må kun bruges på flade og jævne overflader.
- Stå ikke på pedaltræneren.
- Anvendes kun siddende i en stol med pedaltræneren sikkert anbragt på gulvet, eller ved træning af arme; sikkert anbragt på et bord i passende højde.

**Montagebeskrivelse**

- Tag apparatet ud af pakken og monter indstillingsknappen.
- Fold støttebenene ud og fra hinanden indtil de klikker på plads. Gentages for begge støtteben.

**Indstilling af trædemodstand**

Indstillingsknappen bruges til at indstille modstanden i trædepedalerne. Knappen drejes mod uret. Spændes eller løsnes som ønsket.

**OBS!** Produktet kan blive varmt ved intensiv brug!

**Vedligeholdelse**

Snavs kan normalt aftørres med en klud opvredet i mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler, og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen.

**Anbefalet levetid:** Normalt 10 år afhængigt af brugen.

**Genanvendelse**

Produktet er egnet til genanvendelse.

**Bortskaffelse af produktet**

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.

**DK Pedaltræner - varenr. 272003**

**Model with LCD display**

272003 modellen adskiller sig fra 272002 modellen ved det ekstra multifunktionelle LCD display.



**Displayet har følgende funktioner:**

**1. Mode (rød knap):** Denne knap gør det muligt at vælge en bestemt funktion. For at starte skal du holde den røde knap inde i 4 sekunder. Displayet viser de forskellige funktioner (efter et par minutter uden bevægelse, vil enheden automatisk slukke).

**2.** For at vælge en funktion, vent, indtil de fire sekunders start er færdig og tryk på den røde knap igen, og pilen på displayet vil bevæge sig igennem funktionerne. Når den ønskede funktion er valgt, begynd så at træde, og enheden vil

beregne øvelsen.

**3. Time:** Beregner den tid pedaltræneren har været i drift.

**4. Counter (CNT):** Beregner antal omdrejninger, mens du bruger pedaltræneren.

**5. Calorie (CAL):** Beregner antal forbrændte kalorier, mens du bruger pedaltræneren.


**6. Reps per minute (RPM):** Beregner automatisk gentagelser per minut.

**7. Scan:** Viser automatisk resultaterne af alle funktioner.

**Udskiftning af batteri**

Hvis displayet ikke tændes eller er svært at læse, skal batteriet udskiftes.

For at udskifte batteriet, skal du bruge en lille skruetrækker til at fjerne skærmpanelet. Vend skærmpanelet om og fjern urbatteriet. Sæt et nyt batteri i og isæt skærmpanelet.

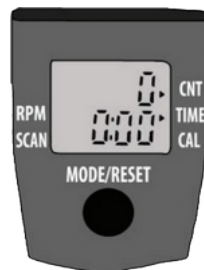

## I Pedaliera - codice 270002

### Descrizione del prodotto

Pedaliera con telaio in acciaio a due colori. I pedali sono dotate di fasce ferma-piedi ed la resistenza alla pedalata è regolabile.

### Note per la sicurezza

- utilizzate il prodotto solo in perfetto stato.
- prima dell'uso controllate il prodotto e se presentasse un qualsiasi danno o difetto contattate immediatamente il Vostro rivenditore di fiducia.
- annotare le note sull'etichetta del prodotto.
- utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ogni altro uso non è consentito.
- usate la pedaliera solo su superfici piane e stando seduti su una sedia o poltrona.
- non caricate il prodotto con pesi superiori alla portata consentita (vedi dati tecnici ed etichetta del prodotto).
- non montare in piedi sulla pedaliera.

### Assemblaggio

- Estraiete la pedaliera dall'imballo e montate il pomello di regolazione.
- Aprite i due supporti d'appoggio su ambo i lati fino a sentire un leggero "click" del pulsante di bloccaggio.

### Regolazione della resistenza alla pedalata

Girare il pomello di regolazione in senso orario per aumentare la resistenza alla pedalata, ed in senso antiorario per diminuire la resistenza.

**ATTENZIONE!** Con un uso prolungato il dispositivo potrebbe surriscaldarsi!

### Manutenzione

Normale sporcizia sulle parti metalliche ed in plastica possono essere rimosse con detergenti convenzionali. Osservate le indicazioni del detergente ed usate solo prodotti adatti alla pulizia o la disinfezione (detergenti privi di solventi o abrasivi).

**Vita utile consigliata:** massimo 10 anni a seconda dell'uso.

### Riutilizzo

Il prodotto è adatto al riutilizzo.

### Smaltimento del prodotto

Il prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici ma deve essere portato al centro di raccolta comunale (CRM O CRZ).

## I Pedaliera - codice 270003

### Modello con display LCD

Il modello 272003 di differenza dal modello 272002 solo con il display LCD in più.



### Il display offre le seguenti funzioni:

**1. Mode** (bottone rosso). Il pulsante permette di selezionare una particolare funzione. Per iniziare, tenere premuto il pulsante rosso per 4 secondi. Il display LCD visualizzerà le diverse funzioni (dopo qualche minuto senza movimento, l'unità si spegne automaticamente).

**2.** Per selezionare una funzione, attendere che il set up dei 4 secondi sia completato. Premere nuovamente il pulsante rosso e la freccia sul display si muoverà attraverso le varie funzioni. Per selezionare la funzione desiderata è sufficiente iniziare a pedalare e l'unità calcolerà l'esercizio.

**3. Time:** Determina la durata dell'esercizio.

**4. Counter (CNT):** Determina la quantità di pedalate durante l'esercizio.

**5. Calorie (CAL):** Determina la quantità di calorie bruciate durante l'utilizzo della pedaliera.


**6. Reps per minute (RPM):** Calcola le ripetizioni al minuto.

**7. Scan:** Passerà in rassegna automaticamente i risultati di tutte le funzioni.

### Sostituzione della batteria

Se il display non si accende o è scarsamente leggibile, la batteria deve essere sostituita.

Per sostituire la batteria, utilizzate un piccolo cacciavite per rimuovere il pannello di visualizzazione. Girate il pannello e rimuovete la batteria. Inserire una nuova batteria e rimettere il pannello sull'unità.

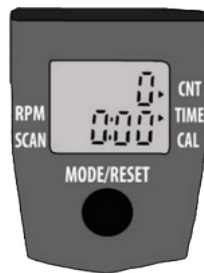

<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">D</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">GB</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">DK</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">I</span>		Technical Data	
<b>Pedaltrainer</b>		<b>Art. Nr. 272002 &amp; 03</b>	
Maße (aufgeklappt)	44 x 39,5 x 23 cm		
Maße (zusammengeklappt)	44 x 27 x 14 cm		
Gesamtgewicht	2,16 kg (2.45 kg)		
Belastbarkeit	100 kg		
<b>Pedal trainer</b>		<b>Item no. 272002 &amp; 03</b>	
Size (unfolded)	44 x 39,5 x 23 cm		
Size (folded)	44 x 27 x 14 cm		
Weight	2,16 kg (2,45 kg)		
Max. load	100 kg		
<b>Pedaltræner</b>		<b>Varenr. 272002 &amp; 03</b>	
Mål i udfoldet stand	44 x 39,5 x 23 cm		
Mål sammenklappet	44 x 27 x 14 cm		
Vægt	2,16 kg (2,45 kg)		
Max. belastning	100 kg		
<b>Pedaliera</b>		<b>Cod. 272002 &amp; 03</b>	
Dimensioni (aperto)	44 x 39,5 x 23 cm		
Dimensioni (chiuso)	44 x 27 x 14 cm		
Peso totale	2,16 kg (2,45 kg)		
Portata max.	100 kg		

### Guarantee terms

Mobilex A/S offers 2 years of warranty for damages caused by errors in production or material errors. The warranty is not valid by not-intended repair or usage of the product. Parts subject to normal wear are not covered by the warranty, unless wear is caused by a manufacturing fault. If product changes are made without our written acceptance the CE-marking and product warranty will not be valid. In the event of product damages covered by this warranty, please notify your dealer or Mobilex A/S directly. The warranty does not cover transport costs and does not include compensation for personal injuries or non-use of the product during repair. The warranty does not cover damages due to the user manual not being followed.



**Declaration of Conformity (CE)**

(Konformitätserklärung / Konformitetserklæring / Dichiarazione di conformità)

The company Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Danmark, declares that the

**Mobilex pedal trainer**

**Item no. 272002 & 272003**

(Artikel Nr., Varenr., Item no., Codice, varenr.)

**is designed and produced in accordance with the technical documentation and the basic requirements of the:**

In Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt /

*Er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de grundlæggende krav i/*

*è stato progettato e costruito in conformità alla documentazione tecnica ed alla seguente normativa CEE)*

*har utformats i enlighet med den tekniska dokumentationen och hantverk som uppfyller följande grundläggande krav*

**In case of unintended incidents or suspected faults, failures or defects of the product, the dealer or Mobilex A/S must be contacted /**

Ved utilsigtede hændelser eller hvis der er formodning om, at der er fejl, svigt eller mangler ved produktet skal forhandleren eller Mobilex A/S kontaktes /

Bei unbeabsichtigten Vorfällen oder vermuteten Fehlern, Ausfällen oder Defekten des Produkts muss der Händler oder Mobilex A/S kontaktiert werden /

In caso di incidenti involontari, di sospetti di guasti, malfunzionamenti o difetti del prodotto, è necessario contattare il rivenditore o la Mobilex A/S /

Vid oförsägbara och oavsiktliga händelser eller om det misstänks att det finns brister, misslyckanden eller fel i produkten, skall kontakteras återförsäljaren eller Mobilex A/S



**EU2017/745 for Medical Equipment**

(über Medizinprodukte / for medicinalprodukter / del Consiglio Europeo / for medicinalprodukter)

Thomas Nygaard Christensen  
**Managing Director**/Geschäftsführer/  
Adm. Direktør/Amministratore unico/  
Verkställande Direktör  
Mobilex A/S  
Skanderborg, 22-04-2021

Signature/Unterschrift/Underskrift/firma

	<b>Mobilex product name</b> EX. For outdoor and indoor use Item nr. xxxxxx
MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK - 8660 Skanderborg Tel: +45 87 93 22 20 www.mobilex.dk	Max. 150 kg
	Max. width = 63 cm
	Max. load in basket = 5 kg
	Produced <input type="text" value="2020.11.12"/>
	Serial nr. <input type="text" value="001"/>

Example of the product label

