

Specielle dæk



KENDA

KUFO
BICYCLE TYRE COMPANY

Bemærk: Alle vores baghjul kan leveres i for-skellige kombinationer af drivringe og dæk.

Letvægtsforhjul med fiber eller aluminiumfælge



Andet tilbehør

BOA højtryk luftpumpe
Højtrykspumpe (145 PSI / 10 bar)
Med lithium batteri (Li-Ion 2000 mAh)
Med mange funktioner og tilbehør



Standard drivringe

Titanium, aluminium, rustfrit stål, høj friction





Specielle drivringe

Mobilex TopGrip og Spinerly TCG og TC



Vores **oval Top-Grip driving** har et skridsikkert overside hvilket giver et bedre greb samt en optimal og behagelig fremdrift. De glatte sider af sort hård-anodiseret aluminium minimerer friktionsvarmen under bremsning. Vi lagerfører kun i 24" / 6 lasker.

Den nye **Spinerly TC** (*tactical control*) rustfri drivring, omdefinerer hvad en drivring kan gøre. Drivningen er fremstillet i specialvalset rustfrit stål og har grundet sin unikke strukturrede overflade en høj friktion for et optimalt greb, samtidig har den holdbarheden som en normal rustfri drivring.

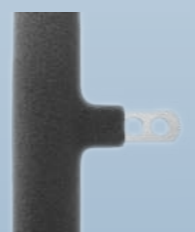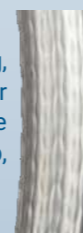

Spinerly har altid været synonym på det bedste inden for kørestolshjul og er nu begyndt at fremstille drivringe. De nye **Spinerly TCG** (*tactical control grip*) drivring er belagt med et unikt latexfrit friktionsmateriale, som med de let strukturerede overflade giver et optimalt greb i al slags vejr.



Tilbehør til aktive kørestolsbrugere



... i hverdagen



... offroad liv



... til sport



Ultralite

Ultralite hjulet er et let og billigt hjul, der kun vejer 1120 gram inkl. dæk og drivring. Hjulet leveres standard med sort nav, sort dobbelt bundet fælg, sorte eger, sølv aluminium drivring, quick release aksel med tryknap samt 1" dæk. Hjulet kan leveres såvel med 12 mm som 1/2" nav. Fås kun i 24" (se venstre billede).



Spinerge Offroad

Spinerge Outdoor hjulpakken er designet med fremdriftseffektivitet og kørestolepræstation i tankerne. Ved at vælge den rigtige hjulstørrelse, kan du minimere ændringen til kørehøjde i forhold til dine standardhjul. Eksempel: Hvis dine daglige hjul er 24" (540) med et 1" dæk, så kan du ved at vælge 22" (501) udendørspakken opnå den samme højde eller reduceret med kun ~ 1/4". Præcise resultater kan variere (se venstre billede).



SLX Sport Lite Extreme

Få endnu mere holdbarhed med 24 af Spinergets 4mm patenterede PBO FIBER eger i et hjul designet til at udføre i den mest krævende kontaktsport. Dette hjul er responsivt, giver ekstrem holdbarhed og er ideel til sportsgrene med tæt kontakt. Hvis du kræver et let hurtigt accelererende og manøvrerbart hjul, kan Sport Lite Extreme være dit svar. Dette hjul ser fantastisk ud, er stilfuldt og giver dig mulighed for at fokusere på spillet, ikke på udstyrsfejl (se billede på venstre).

SPOX Everyday

Spinerge byggede sit ry som markedsleder med SPOX Everyday kørestolshjulene. De har været bedst sælgende i 15 år og er bygget til langvarigt brug. Disse hjul er den bedste opgrader du kan lave på en kørestol og SPOX Everyday hjulene giver god værdi for pengene (se højre billede).



Bemærk

Alle Spinerge hjul fås i størrelserne 24", 25", 26" eller 28", også i kombination med forskellige eger farver (se billedet ovenfor).



Blade LXL

Blade LXL er det letteste kørestolshjul på markedet. Udviklet som et utrolig stilfuldt og æstetisk hjul med et smukt design, der aldrig ofrer præstation og holdbarhed. Blade LXL har en 17 mm perle breddefelt, et nyt minimalistisk nav design og selvfølgelig de patenterede PBO blade fiber eger (se billede på højre).



Blade LXL hjulet er også tilgængeligt med **carbon fiber fælg** (Spinerge carbon blade)



Flexrim

Spinerge FLEXRIM er et revolutionerende produkt, der ændrer måden folk bruger en kørestol på. Med uretanmaterialet, der holder drivringen på fælg, får brugeren mulighed for at skubbe uden at være i kontakt med dækket. Det ultralette og ekstremt stærke materiale gør det muligt at bøje drivringen og giver kørestolsbrugeren ekstra 25 mm, når smalle døråbninger skal forceres. Dette produkt er unikt i forhold til alt andet på markedet og et must til dagligdagsbrugere af kørestole (se venstre billede).



Mobilex Offroad

Mobilex 24" offroad hjul komplet med dobbeltbundet fælg. Hjulet leveres standard med sort nav, sort dobbeltbundet fælg, sort aluminium drivring samt 24" x 1.75" sort mountain bike dæk. Hjulet kan leveres med 12 mm eller 1/2" nav. Fås kun i 24" (se billede til venstre).



X-SLX Lite Extreme X-Laced

Den seneste designudvikling fra Spinerge, der tager hjulets ydeevne til det næste niveau. Sport Lite Extreme SLX X-Laced med patenterede 4 mm PBO FIBER eger giver ekstra torsional stivhed og hurtigere skubbe respons. Udviklet til atleter, der stiller særlige krav til kørestolen (se billede på venstre).