

# SPEICHERSCHUTZ SPEICHERSCHUTZ

- p) Earth
- q) Lion
- r) Flamingo



- s) Orange
- t) Lightning
- u) Girl



## Individuell gestaltete Speichenschützer Was liefert Mobilex?

Mobilex stellt personalisierte Speichenschützer in den Maßen 20", 22" und 24" her. Weitere Maße sind stückzahlabhängig und können auf Anfrage angeboten werden.

Die Speichenschützer werden mittels Siebdruck (Serigrafie) bedruckt.

Die Speichenschützer bestehen aus transparentem PETG, sind leicht gewölbt und haben Ausparungen für die 4 oder 6 Befestigungsstege der Greifringe. Sie werden mit 6 Clips an den Speichen des Rollstuhlrades befestigt. Auf den Speichenschützern sind die dazu benötigten Löcher bereits vorhanden und die benötigten Clips sind im Lieferumfang enthalten. Form und Material entsprechen den bedruckten Speichenschützer aus dem Mobilex Standard-Programm.

Mobilex kümmert sich um den gesamten Ablauf der Herstellung, des Druckes und der Lieferung.

## Individuell gestaltete Speichenschützer Was benötigen wir von Ihnen?

### Formate:

Im Idealfall liefern Sie uns die gewünschte Zeichnung oder das Logo bereits aufbereitet als Vektorgrafik (.svg, .eps, .ai) da das Layout so schneller und präziser gestaltet werden kann.

Haben Sie Ihr grafisches Material nicht als Vektorgrafik vorliegen akzeptieren wir auch .tif, .png oder .jpg Formate mit einer Auflösung von 300 dpi bei einer Größe von ca: 200 x 200 mm. Achtung: In diesem Falle können Layout Bearbeitungskosten entstehen

### Farben:

Gedruckt wird im Pantone oder HKS Farbsystem. Beim Druck wird für jede Farbe eine Druckform erstellt, mit der dann die Farben separat hintereinander auf den Speichenschutz gebracht werden. Wir benötigen also pro Farbe die Angabe der Pantone oder HKS Farb-nummern bzw. -bezeichnungen.

### ACHTUNG! Mindestbestellmenge: 25 Paar.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Mobilex A/S - Grønlandsvej 5 - DK-8660 Skanderborg - [www.mobilex.dk](http://www.mobilex.dk)



# SPEICHERSCHUTZ SPEICHERSCHUTZ




Händler

Mobilex A/S  
Grønlandsvej 5  
DK-8660 Skanderborg

Tel. +45 87 93 22 20  
Fax +45 87 93 17 77  
[www.mobilex.dk](http://www.mobilex.dk)

SPEICHENSCHUTZ  
SPEICHENSCHUTZ

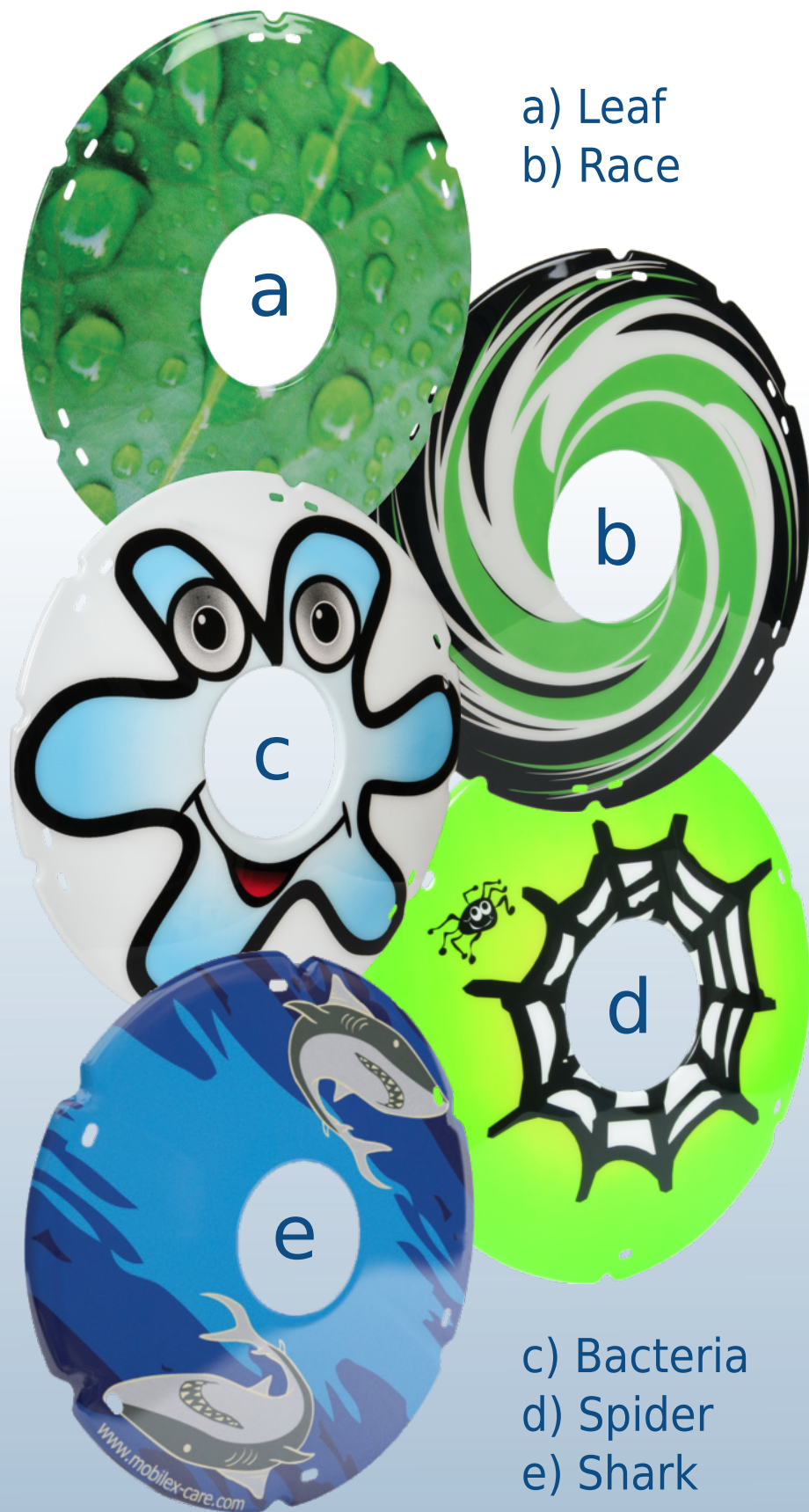

a) Leaf  
b) Race

c) Bacteria  
d) Spider  
e) Shark

SPEICHENSCHUTZ  
SPEICHENSCHUTZ



f) Bat  
g) Dragon

h) Dolphin  
i) Fire  
j) Horse

SPEICHENSCHUTZ  
SPEICHENSCHUTZ



k) Music  
l) Chameleon

m) Ghost  
n) Stallion  
o) Flower