

Der **Kudu** Leichtgewichtsrollator hat einen silberfarbenen Aluminium-Rahmen. Das Faltsystem mit Kreuzgelenk ermöglicht ein Zusammenklappen wie bei einem Rollstuhl und reduziert den Platzbedarf im gefalteten Zustand auf ein Minimum. Der Sitz und die abnehmbare Tasche bestehen aus reissfestem Nylon. Die Tasche hat einen Tragegriff und kann so auch als Einkaufstasche verwendet werden. Der Rollator ist mit Rückengurt ausgestattet. Leicht zum Auf- und Zuklappen ist der Rollator mit seinen großen 200 mm Rädern für eine Verwendung sowohl im Freien wie in geschlossenen Räumen geeignet. Die Schiebegriffe lassen sich sehr einfach in der Höhe an den Benutzer anpassen und ermöglichen ein bequemes und sicheres Vorankommen. Der Rollator ist mit zwei feststellbaren Bremsen an den Hinterrädern ausgestattet. Der Rollator wird serienmäßig mit Ankipphilfe, Stockhalter und Klingel, sowie einem Tablett das sich auf den Sitz montieren lässt, ausgeliefert.

<b>Mobilex Rollator Kudu</b> HMV Nr. 10.50.04.1230	<b>Standard</b> Art.Nr. 312075	<b>Medium</b> Art.Nr. 312076	<b>Small</b> Art.Nr. 312077
<i>Schiebestangen höhenverstellbar</i>	80 - 98,5 cm	79 - 88 cm	69 - 80 cm
<i>Sitzmaße (H x B x T)</i>	65 x 42 x 20,5 cm	57 x 42 x 20,5 cm	50 x 42 x 20,5 cm
<i>Faltmaße (H x B x T)</i>	82 x 29 x 67 cm	79 x 27 x 68 cm	67 x 27 x 72 cm
<i>Gesamtbreite offen</i>	61 cm	61 cm	61 cm
<i>Innere Breite zwischen den Handgriffen</i>	45,5 cm	45,5 cm	45,5 cm
<i>Länge (Tiefe)</i>	67 cm	68 cm	70 cm
<i>Gewicht</i>	8,0 kg	7,9 kg	7,7 kg
<i>Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)</i>	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
<i>Bremsen</i>	2 feststellbar mit Parkfunktion		
<i>Radgrößen</i>	vorne und hinten: 200 x 35 mm		



**RK1a.** Mobilex "Kudu" Rollator



**RK1b.** Der "Kudu" Rollator gefaltet


## Serienmäßiges Zubehör



**RK1c.** Klingel



**RK1d.** Tablett

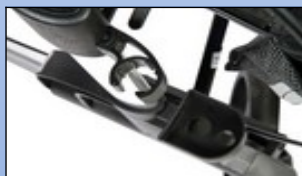

**RK1e.** Stockhalter



**RK1f.** Ankipphilfe