


SCHINE WALK

Eine Unterstutzung, auf die Sie sich verlassen können.

Haben Sie jemals über die kleine Plastikhülse am Ende von Krücken und Gehstöcken nachgedacht? Welche Funktion sie eigentlich hat und ob sie ausgetauscht werden kann? Vielleicht haben Sie sich gefragt, wie eine neue Variante aussehen könnte - und ob sie tatsächlich einen Unterschied machen würde?

Wir haben die Antwort: Schine Walk. Ein leichter Krückenfuß, der Ihren Gang mit Krücken oder Gehstock sicherer und geschmeidiger macht, gleichzeitig damit er auch einen guten Halt in verschiedenen Winkeln und auf unterschiedlichen Unterlagen bietet.

89g

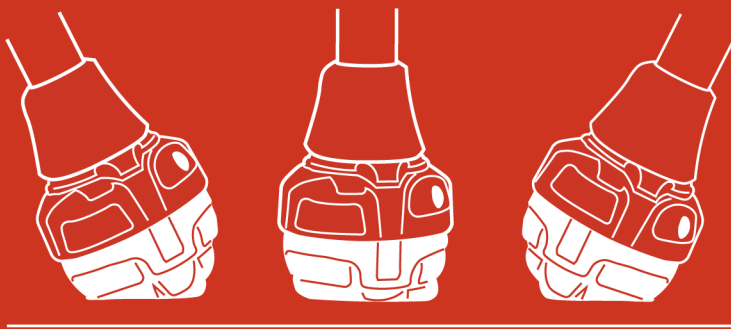

Geschmeidig, stabil und flexibel



Der schalenförmige untere Teil des Schine Walk, der Dämpfer, besteht aus einem Kunststoff mit hohem Reibungswiderstand.

Bei Belastung wird der Stoßdämpfer zusammengedrückt, wodurch eine große Auflagefläche entsteht, die sich der Unterlage anpasst.

Das Design des Dämpfers ist von einem Reifenprofilen inspiriert und sorgt für guten Halt in verschiedenen Umgebungen.

Auflagefläche

Im Vergleich zu einem herkömmlichen Krückenfuß hat der Schine Walk eine größere Auflagefläche. Er ist breit und flexibel, sodass er sich an verschiedene Winkel und Unterlage anpasst, wie unebene Flächen oder geneigtes Gelände.

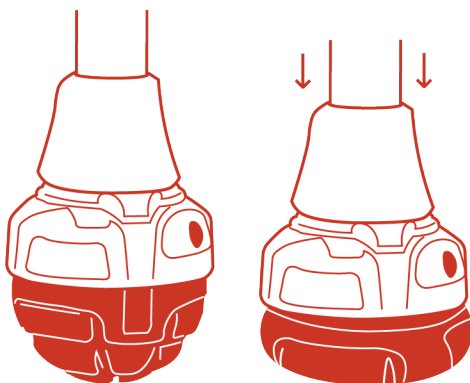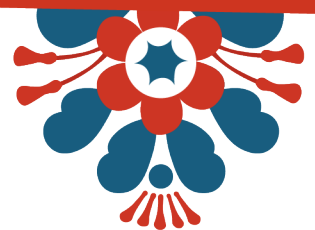

Schine Walk




Standard-Krückenfuß

Das Konzept Schine Walk

Der Halter, rechts, wird mit Hilfe einer Mutter an der Krücke montiert. Der Dämpfer, unten, ist in verschiedenen Varianten erhältlich: Medium und fest. Für winterliche Unterlagen ist der feste Dämpfer mit Spikes von Bestgrip® ausgestattet. Die Dämpfer sind farb-codiert.

Der Dämpfer kann einfach in den Halter eingeklickt und wieder herausgenommen werden, was einen schnellen und unkomplizierten Austausch des Dämpfers ermöglicht, ohne dass der Halter entfernt werden muss. Dies ist besonders praktisch im Winter, wenn man zwischen Innen- und Außenbelägen wechselt - einfach auf die mit Spikes Variante umsteigen, wenn man nach draußen geht.

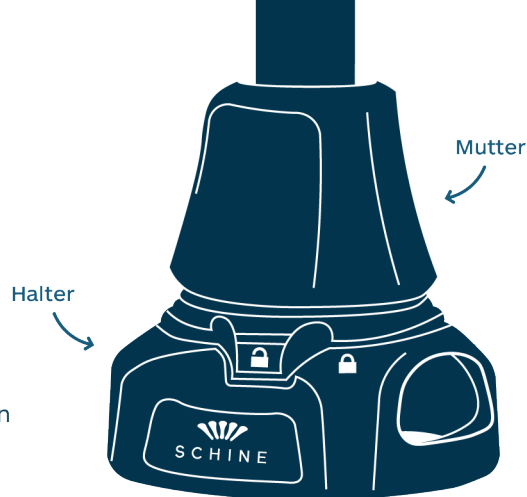

Feste Dämpfung, rot

- Stabiler mit härterer Stoßdämpfung.
- Perfekt für diejenigen, die extra Widerstand benötigen.
- Zum Beispiel, wenn man sich nur auf ein Bein stützt oder einen kräftigeren Gang hat, wie beim Training.



Medium Dämpfung, blau

- Sanfter und flexibler Widerstand.
- Geeignet für diejenigen, die die Krücke oder den Gehstock beim Gehen nicht stark belasten.
- Zum Beispiel als Unterstützung für das Gleichgewicht oder beim Gehen mit einer Prothese.



Dämpfung mit Spikes, schwarz

- Der feste Dämpfer ist mit 9 Spikes von Bestgrip® ausgestattet.
- Mit Grip und großer Auflagefläche bietet er extra Sicherheit beim Gehen auf Eis und Schnee.

Kurze Produktinformationen

Schine Walk...

Erhöht Krücke/Gehstöcke um 6 cm.
Passt für Krückenbein mit einem Durchmesser von 17 mm, 19 mm & 19,5 mm.
Ist 95 mm lang.
Ist 56 mm breit.

In Schweden aus recycelbaren Kunststoffen hergestellt.
Hat ein maximales Benutzergewicht von 140 kg.
Ist patentiert.



Scannen und
mehr erfahren.



Finden Sie einen Händler unter: mobilex.dk

Milmas AB
Lägersvågen 8
SE-791 52 Falun

